

# Digital Personvekt **7815**



## Brukermanual

**Innholdsfortegnelse:**

1. Introduksjon.....	3
2. Liste over deler .....	3
3. Oppsett av vekten.....	4
3.1 Innstilling av kilo/pund og innstallering av batterier .....	4
4. Måling av vekt .....	5
5. Meldinger på vekten.....	6
6. Rengjøring, vedlikehold og avfallshåndtering.....	6
7. Tekniske data .....	7
8. Regelverk.....	7

## 1. Introduksjon

7815 Digital Personvekt er et apparat for å måle vekten din.  
Les hele brukermanualen før bruk. Dersom du har spørsmål om vekten som ikke er besvart i denne manual, kontakt kundeservice.


## 2. Liste over deler

Se til at din Soehnle Professional vektpakke inneholder følgende deler:

7815 Digital Personvekt



Fire AA batterier

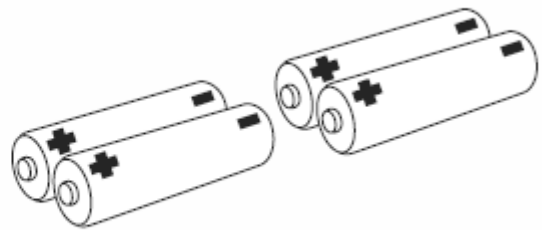

Oppbevar plastikkemballasje og batterier vekk fra spedbarn og barn - fare for kvelning.


### 3. Oppsett av vekten

Før du bruker vekten, må du stille inn vektenhet for måling med kilo/pund bryteren og installere batteriene.

#### 3.1 Innstilling av kilo/pund og installering av batterier

For å stille inn kilo (kg) /pund (lb) og installere batterier:

1. Åpne batteridekselet på undersiden av vekten
2. På innsiden av batteridekselet, setter du enheten for måling som er standard for ditt land ved å bruke kg / lb bryteren.

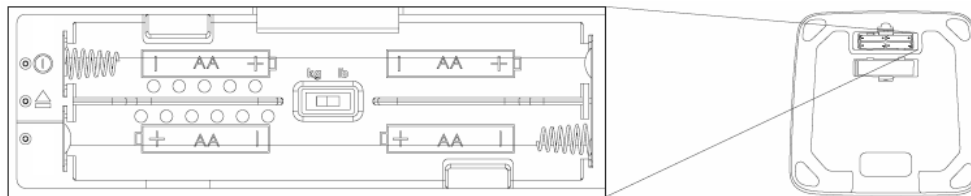

3. Installer batteriene som indikert av diagrammet på innsiden av batteridekselet
4. Sett batteridekselet på plass igjen.



Når du bytter batteri, sørg for å bytte hele settet med batterier. Det må ikke brukes oppladbare batterier – dette kan føre til lekkasje av væske fra batteriene.

## 4. Måling av vekt

Uansett når du måler din vekt, er standard prosedyre det samme.



- Ikke tre opp på vekten med våte føtter, våte sokker eller våte sko. Sørg for at vekten står stabilt når du trer opp på vekten.
- Ikke la vekten bli våt. Vekten kan bli glatt når den er våt, og fuktighet kan ødelegge vekten.
- Ikke støtt deg eller len deg til noe under målingen, vektverdien vil da ikke bli korrekt.

### Før du begynner

For å være sikker på nøyaktig måling, følg følgende forslag:

- Vei deg på samme tidspunkt hver dag.
- Bruk lignende klær ved hver måling.

### Prosedyre



For å måle vekten din:

1. Plasser vekten på et solid, avrettet og flatt underlag.
2. For å aktivere vekten, gi den et lett trykk med en fot. Vekten er klar når du har hørt et pip og 0.0 kg. vises i display. Tre opp på vekten for å stare veiingen.
3. Når vekten din er målt, vises vekten i displayet.
4. Gå av vekten. Vekten viser vektresultatet i ca. 5 sekunder og slår seg automatisk av etter 45 sekunder.

## 5. Meldinger på vekten

Under bruk av vekten, kan meldinger i displayet vises. Noen meldinger indikerer at et problem har oppstått.

Følgende tabell gir forklaring på meldinger som kan vises i displayet på vekten og hva du kan gjøre for å prøve å løse problemet. Dersom du ikke klarer å løse problemet, kontakt kundeservice.

Melding	Antall pip	Beskrivelse
-OL-	5	Vektgrensen på 250kg (550 lb) er oversteget.
EC92	5	Kalibreringsdata i vekten er enten mistet eller slettet. Vennligst returner vekten for inspeksjon.
	0	Lavt batterinivå. Sørg for å ha et sett erstatningsbatterier tilgjengelig. Du kan fortsette å veie deg på vekten.
	5	Batteriene må erstattes. Installer nye batterier før du bruker vekten igjen.
-UL-	5	Start vekten på nytt uten å ha noe på den.
H	0	Din vekt har blitt målt.

## 6. Rengjøring, vedlikehold og avfallshåndtering

For å rengjøre vekten, bruk en myk klut fuktet i vann. Ikke bruk kjemikalier eller skuremidler. Sørg for at ikke fuktighet / væske kommer inn i vekten.

Dersom vekten trenger vedlikehold eller kassering, kontakt deres leverandør. Ikke kast vekten, tilbehør eller batterier i vanlig avfall.

I Europa skal elektrisk og elektronisk avfall, batterier og tilhørende forpakninger sorteres separat og håndteres på et miljøforsvarlig grunnlag ifølge direktiv 2012/19/EU.

## 7. Tekniske data

Vekten har en maksimum vektgrense på 250 kg (550 lb).

Vekten har en minimum vektgrense på 8 kg (17 lb).

Bruk vekten kun innendørs.

Ikke la objekter blir stående på vekten. Dersom du lar objekter bli stående på vekten, kan dette føre til at vekten din vil bli målt ukorrekt.

Dersom vekten har en funksjonsfeil, kontakt kundeservice.

Maksimum vekt:	250 kg (550 lb)
Minimum vekt:	8 kg (17 lb)
Display trinn:	0,1 kg (0,2 lb)
Display:	LCD, 30 mm sifferhøyde
Beskyttelsesklasse:	IP22
Driftstemperatur:	+10 C til +40 C (+50 F til +104 F)
Lagringstemperatur:	-30 C til +70 C (-22 F til +158 F)
Batterier:	4 x 1,5 V AA (R6P)

## 8. Regelverk

### Direktiv

7815 Digital Personvekt samsvarer med relevante forskrifter fra EU-direktiv og US-regelverk.

2014/30/EU	EMC
1907/2006/EC	REACH
2011/65/EU	ROHS

### Overensstemmelse med EU-direktiv

Vekten er forstyrrelsesfri i samsvar med gjeldende EU-direktiv 2014/30 / EU. Under ekstreme elektrostatiske eller elektromagnetiske påvirkninger (for eksempel ved bruk av en radioenhet eller mobiltelefon i umiddelbar nærhet av vekten), kan den viste målingen være feil. Når forstyrrelsen ikke lenger er til stede, kan produktet brukes igjen som vanlig. Det kan imidlertid være nødvendig å starte vekten på nytt. Vekten er en sensitiv måleenhet. Utkast, vibrasjoner, plutselige temperaturendringer og sollys kan påvirke veieresultater. Vekten overholder beskyttelsesklasse IP 22. Unngå å utsette vekten for høy luftfuktighet, damp, aggressive væsker og kraftig tilsmussing.



**Medic24**

E-post: [info@medic24.net](mailto:info@medic24.net)

Tlf: +47 35 57 03 00

**Soehnle Industrial Solutions GmbH**

Gaildorfer Straße 6  
DE-71522 Backnang

Telefon: +49 (0) 71 91 / 34 53 - 220

Telefax: +49 (0) 71 91 / 34 53 - 211

[info@soehnle-professional.com](mailto:info@soehnle-professional.com)

[www.soehnle-professional.com](http://www.soehnle-professional.com)

470.051.173 NO | V.1 | 10-2017 | Technical data is subject to change.